

测试报告

样品信息			
样品名称	酒石酸长春瑞滨	编号	W20180509-003
样品重量	\	剂型	\
收样日期	2018/05/09	测试期间	2018/05/23-05/24
样品描述	/		
测试需求			
测试成分	含量测定		
参考标准			
参考标准	客户标准	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	岛津 LC-20AD

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Ultimate® XB-C18 (3.9×150mm, 5 μm, 300A)
流动相:	0.05mol/L 磷酸二氢钠溶液 (pH4.2)/0.2%癸烷磺酸钠的甲醇溶液=38/62
检测波长:	267nm
柱温:	38℃
流速:	1.0ml/min
进样量:	20μL
注意事项:	/

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969

邮编: 321000

E-mail:xiaomeiwu@welchmat.com

● 流动相配置:

0.05mol/L 磷酸二氢钠溶液: 取磷酸二氢钠, 加水配成 0.05mol/L 的溶液, 用磷酸调节 pH4.2, 摇匀, 即得;

0.2%癸烷磺酸钠的甲醇溶液: 取 2g 癸烷磺酸钠, 溶于 1000ml 甲醇中, 摇匀, 即得。


取以上两种溶液, 以 38/62 的比例配成混合溶液, 抽滤, 即得。

● 样品溶液的配置:

样品溶液: 取酒石酸长春瑞滨, 用流动相配成 1.4mg/ml 的溶液, 即得。

● 谱图和数据

1、样品溶液:

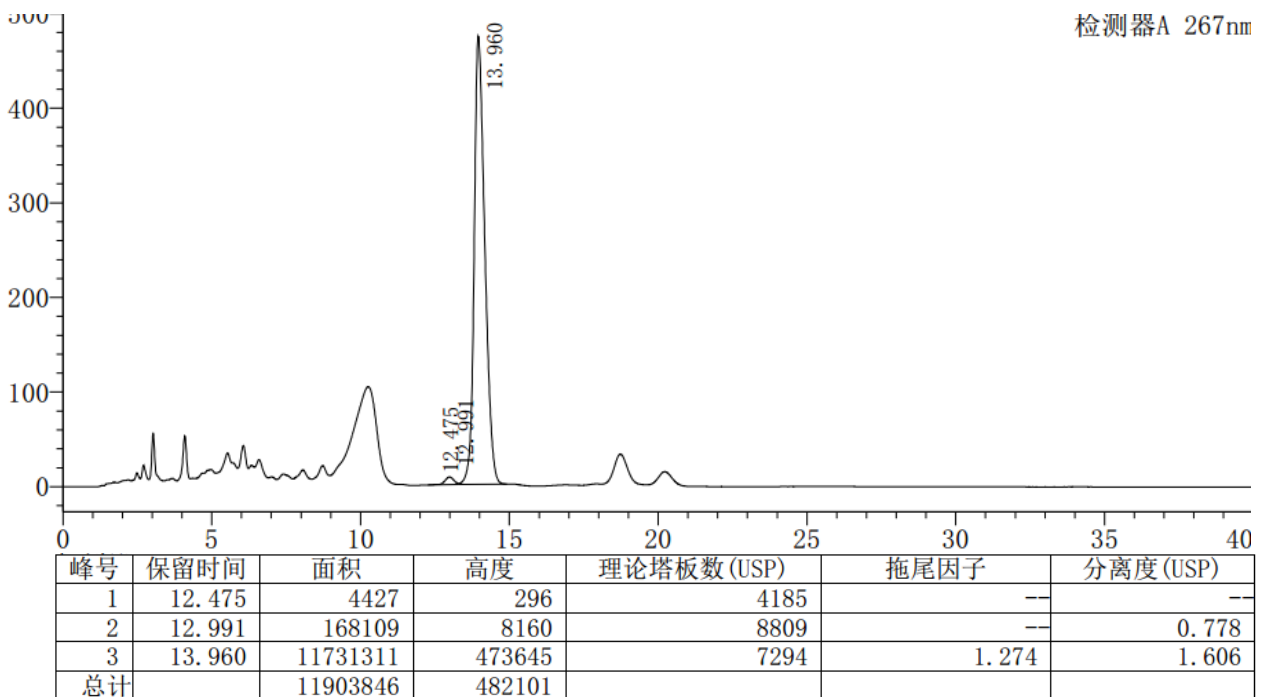

● 结论

月旭 Ultimate®XB- C18 (3.9×150mm, 5 μ m, 300A), 按照中国药典 2015 年版二部标准检测, 可以达到要求, 可用于此产品的检测。

报告签字

测试: 吴小梅

日期: 2018-05-24

审核: 郭德勇

日期: 2018-05-24

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969

邮编: 321000

E-mail:xiaomeiwu@welchmat.com